

החופש לנשום. בכל מקום.

מחולל חמצן נייד

עד 7 שעות

1,2 ק"ג + 0.78 ק"ג סלולה

SM 7

SMedic

החיים לא נעצרים. גם אספקת החמצן שלכם לא צריכה.

הגיע הזמן להפסיק לתכנן את היום סביב מגבלות החמצן,
ולהתחיל לחיות אותו בתנועה מלאה.



הכירו את ה-SM 7. ניידות, ביצועים ושקט נפשי בעיצוב אחד.



קל משקל

1.98 ק"ג בלבד לחופש תנועה מוחלט.



ביצועים גבוהים


ריכוז חמצן עד 96% בכל 6 דרגות העוצמה.



עצמאות אנרגטית

סוללה עוצמתית לשימוש של עד 7 שעות דרגה 1

עיצוב שנועד לזוז איתכם.

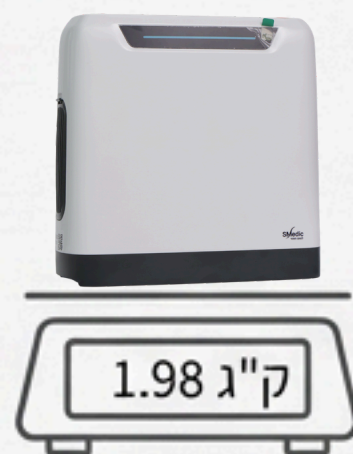

- **משקל נוצה:** 1.98 ק"ג בלבד (כולל סוללה), לנשיאה ללא מאמץ.

- **קומפקטי ודיסקרטי:** ממדים קטנים (19.9x18.3x8.6 ס"מ) המאפשרים ניידות וחופש פעולה.

- **תיק נשיאה ייעודי:** כלול בערכה, מעוצב לנוחות והגנה מרבית על המכשיר. המכשיר.



טכנולוגיית Pulse Flow: חמצן חכם, בדיוק כשצריך.

המערכת מזהה את קצב הנשימה ומספקת חמצן בדיוק במקצב שלך. התוצאה: חווית שימוש טבעית וניצול יעיל של חיי הסוללה.

7 שעות
6 שעות
5,5 שעות
4,5 שעות
3,5 שעות
2-2.5 שעות

עוצמת זרימה	
דרגה	זרימה כוללת (ml/min)
1	200 ml/min
2	400 ml/min
3	600 ml/min
4	800 ml/min
5	1000 ml/min
6	1200 ml/min

ריכוז חמצן של 90%-96% נשמר בכל דרגות העוצמה.

אנרגיה שמלווה אותך. מהבית, לרכב, ולהרפתקה הבאה.




זמן פעולה ארוך: 7 שעות דרגה 1
פעולה רציפה, בהתאם לעוצמת השימוש.



טעינה מהירה: סוללה מלאה בפחות מ-2.5 שעות.



גמישות טעינה מלאה: כולל מטען ביתי (AC) ומטען לרכב (DC) ללא תוספת תשלום.

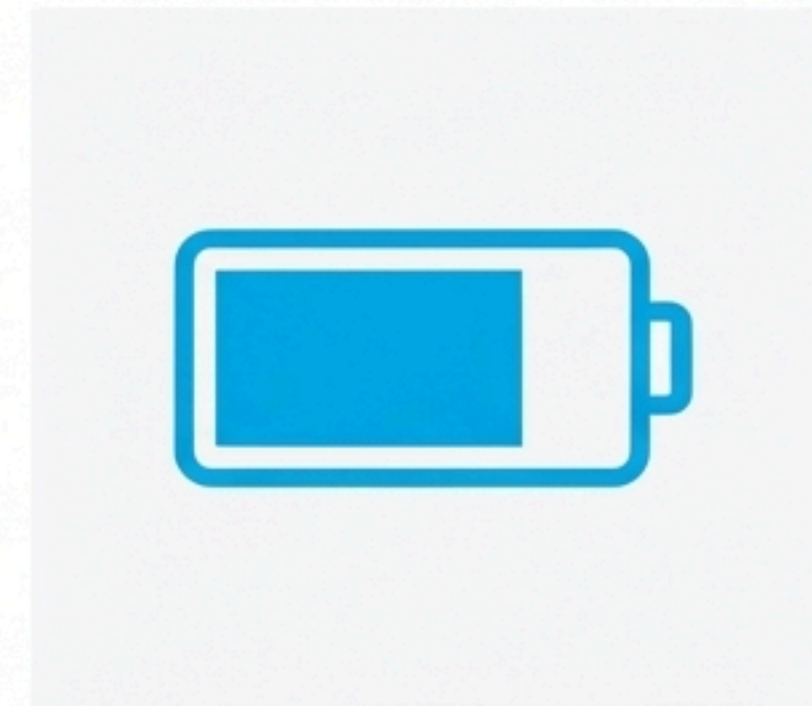

שליטה מלאה, בפשטות ובבהירות.






מסך תצוגה גדול וברור מציג את כל הנתונים החיוניים: דרגת עוצמה, זמן שימוש ומצב סוללה. לחצנים אינטואיטיביים מאפשרים תפעול קל ומהיר.

בטיחות וביטחון בכל נשימה.




- **מערכת התראות חכמה:** התראות קוליות וויזואליות למצבים קריטיים. התראות עיקריות כוללות:

- ריכוז חמצן נמוך (מתחת ל-80%) ↓%
- סוללה חלשה 
- הפסקת נשימה (מעל 15 שניות) 
- תקלות מערכת (מאוורר, מדחס) 

תחזוקה פשוטה, לעצמאות לאורך זמן.

1. החלפת פילטרים

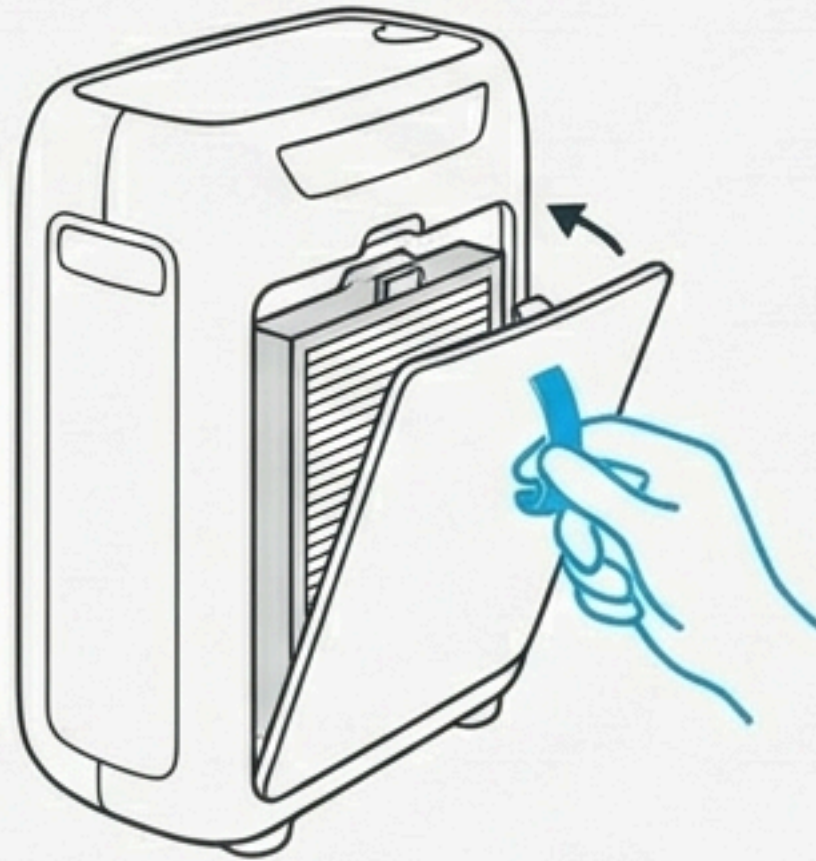

2. החלפת מסננת מולקולרית



תוכנן לתחזוקה קלה ונוחה על ידי המשתמש, ללא צורך בטכנאי. החלפה מהירה של פילטרים ומסננת מולקולרית מבטיחה ביצועים אופטימליים לאורך זמן.

כל מה שצריך כדי לצאת לדרך, מהרגע הראשון.

מחולל חמצן




סוללת ליתיום



תיק נשיאה



מטען ביתי AC

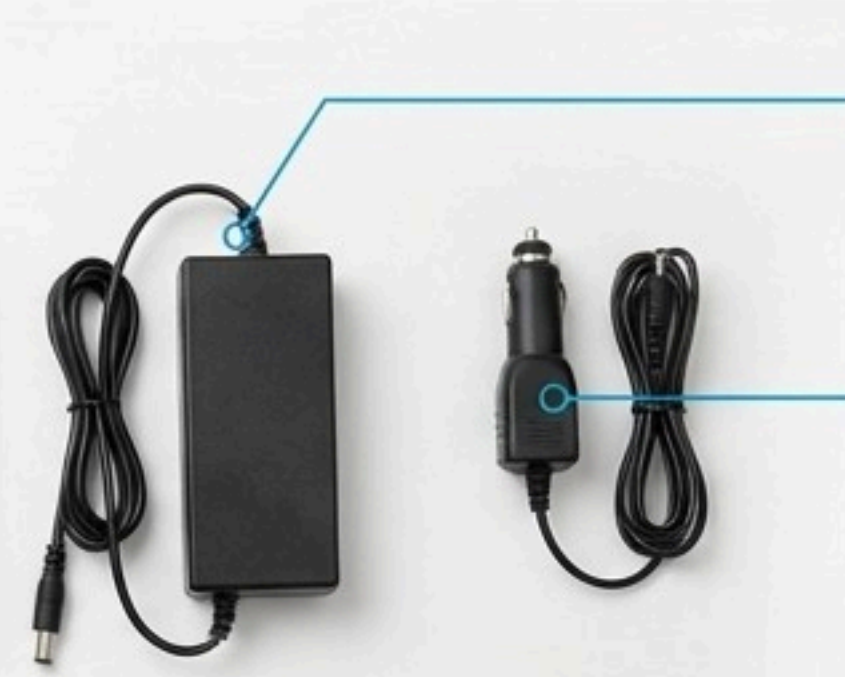

מטען לרכב DC

2 צינוריות חמצן
(משקפיים)



2 סטים של פילטרים
להחלפה

מדריך למשתמש

מפרט טכני מלא

דגם	SM 7
ריכוז חמצן	90%-96% (בכל הדרגות)
קצב זרימה (Pulse)	1-6 דרגות
משקל (עם סוללה)	1,98 ק"ג
מידות	19.9x18.3x8.6 ס"מ
זמן פעולת סוללה	7 שעות דרגה 1
זמן טעינת סוללה	עד 2.5 שעות
רמת רעש	≤60dB(A)
סביבת עבודה (טמפ')	5°C - 40°C
גובה עבודה מרבי	0 - 4000 מטר

S-Medic: השותפים שלכם לבריאות ואיכות חיים.

The logo for S-Medic features the word "SMedic" in a bold, black, sans-serif font. The "S" and "M" are connected, with a large, elegant, black swoosh that starts under the "M", curves upwards and to the right, and then loops back down to underline the "S".

SMedic

אנו ב-S-Medic מחייבים לספק את הפתרונות הרפואיים המתקדמים
המתקדמים והאמינים ביותר.

www.s-medic.co.il

+972-3-9099001